

Componente și verificare

Identificați piesele A-E înainte de a începe montajul.



Înălțător pentru toaletă cu mânere JL670B

Fixare frontală, corp din plastic și mânere de sprijin


● Înălțime 12 cm

● Greutate 2,4 kg

● Fixare reglabilă

Lista pieselor A-E


A

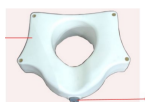

Corp înălțător

1 buc.


B

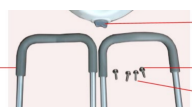

Mânere cu inserții moi

2 buc.


C

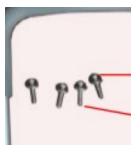

Șaibe plate

4 buc.

D

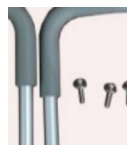

Șuruburi de fixare

4 buc.

E



Reglaj frontal

integrat

Date esențiale

LĂȚIME

52 cm

ADÂNCIME

43 cm

ÎNĂLȚIME

12 cm

GREUTATE

2,4 kg

MATERIAL

plastic

FIXARE

șurub frontal

IMPORTANT

Folosiți produsul numai după ce reglajul frontal este strâns și înălțătorul nu se mișcă.

Înainte de utilizare

- Verificați dacă vasul toaletei este curat, uscat și stabil.
- Controlați șuruburile și poziția ambelor mânere.

Utilizare sigură


- Așezați înălțătorul centrat pe vasul toaletei.
- Opiți utilizarea dacă apare joc, fisuri sau deformări.

Asamblare în 4 pași

Urmați ordinea indicată și verificați fixarea înainte de fiecare utilizare.

1

Introduceți mânerele

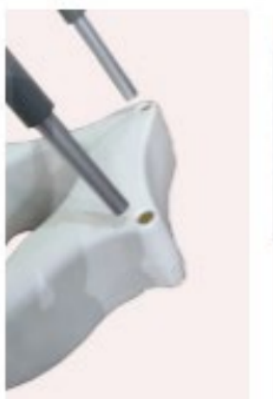

Introduceți cele două mâneri B în orificiile corpului A până la capăt.

2

Fixați mânerele



Montați șaibele C și șuruburile D pe partea inferioară; strângeți uniform.

3


Poziționați înălțătorul



Așezați corpul A centrat pe vasul toaletei și verificați contactul uniform.

4

Strângeți reglajul frontal

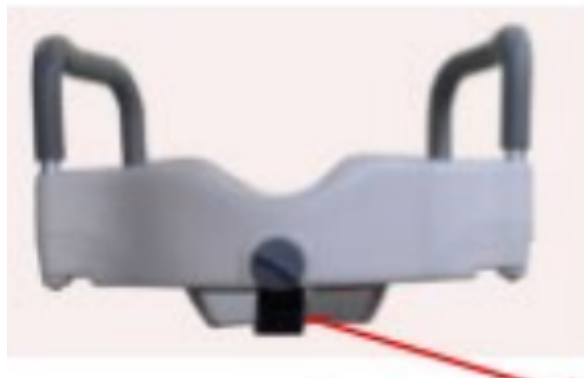

Rotiți reglajul E până când produsul este ferm și nu se deplasează.

VERIFICARE FINALĂ

Apăsăți ușor în toate direcțiile: produsul trebuie să rămână centrat și stabil.

Curățați cu apă caldă și detergent delicat. Clătiți, uscați complet și verificați periodic șuruburile și reglajul frontal.

Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau dacă fixarea nu poate fi realizată ferm.