

JL9181LH Manual de utilizare

1. EXPLICAȚIE GENERALĂ DESPRE ROLLATOR



1	Mânerul de împingere	7	Roata din față
2	Sediu	8	Furcă față
3	Manetă de frână	9	Geantă de cumpărături
4	Ajustare pentru mânerul de împingere		
5	Cadru lateral		
6	Roata spate		

Înălțime totală	80-93cm
Lungimea totală	72cm
Lățimea totală	67cm
Lățimea scaunului	45cm
Înălțimea scaunului	58cm
Adâncimea scaunului	32cm
Greutatea maximă a utilizatorului	100kg

2. Utilizare corectă



1. Împinge rollatorul înăuntru și așază-l confortabil în fața ta, asigurându-te că toate cele patru roți se sprijină pe sol.

2. Mergi cu grijă înainte, împingând rollatorul datorită celor patru roți care îți permit mișcarea.

3. Menține întotdeauna o poziție verticală. Amintește-ți că mânerele sunt reglabile ca înălțime pentru a asigura o poziție ideală și a evita problemele de spate

3. Instalația de asamblare

3.1 Scoate tot conținutul din cutie, pe lângă suportul pentru picioare și roata, majoritatea pieselor rollatorului au fost asamblate.

3.2 Asamblează cele două roți din față în cadrul cadrului

Desfăci suportul pentru picioare și folosește clema roșie pentru a fixa sprijinul pentru picioare.

Auzi un clic, rollatorul este complet fix.



4. Desfășurarea și plierea rollatorului

Desfășurarea rollatorului

*Asigură-te că stai în spatele rollatorului;

*Apucă ambele tuburi de șa și îndepărtează-le;

*Împinge ambele tuburi de șa în jos astfel încât rollatorul să se desfășure, când

Auzi un clic, rollatorul este complet desfășurat, vezi imaginea 1.


Plierea rollatorului

*Asigură-te că stai în spatele rollatorului.

*Trage cureaua în sus pentru a plia rollatorul, vezi imaginea 2.



Picture 1

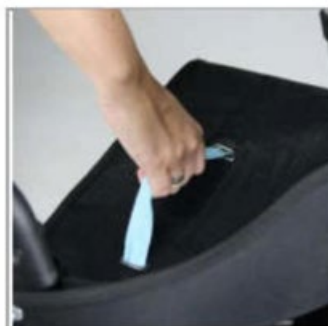

Picture 2

5. Folosirea frânelor

Rollatorul tău are două tipuri de frâne. Frâna de conducere și frâna de parcare

Frână de conducere

*Când trebuie să încetinești viteza în timp ce împingi rollatorul, trebuie să o faci

Apasă maneta frânei pentru a reduce viteza, vezi imaginea 4;

*Fii conștient că nu apeși rollatorul în timp ce apeși maneta de frână. I

Dacă încerci să faci asta, acest zid provoacă daune la anvelope și la frână ceea ce va duce la deteriorarea frânelor;

*După cum s-a menționat mai devreme în paragraful 3.2, nu folosiți rollatorul dacă frânele sunt defecte!



Picture 4

Frână de parcare

*Apasă maneta de frână în jos pentru a activa frâna de parcare, vezi Imaginea 5, vei auzi un clic care confirmă că frâna de parcare este activată;

*Apasă pentru a scoate frâna de parcare, acest lucru va fi confirmat când se aude un clic.



Picture 5

6. Setarea înălțimii mânerelor de împingere

Pentru a folosi cât mai bine mersul tău, poți seta înălțimea ghidonului

*Apasă butoanele de reglaj de pe lateralul cadrului din cadru de mers pe fundal, vezi figura 7.

*Tragerea sau apăsarea butoanelor va determina automat ajustarea, apoi vei auzi un clic al cadrului până la înălțimea dorită;

*Butoanele de reglaj s-au slăbit. Dacă încă poți să-l miști, mișcă-l sau apasă mânerul până auzi un clic. Mânerul de împingere nu mai poate fi mișcat.



Picture 7