

Manualul de utilizare al patului electric de îngrijire la domiciliu JL8102



Conținut

1. Introducere manuală.....	1
2. Sferă aplicabilă.....	1
3. Caracteristici.....	1
4. Parametri tehnici.....	1
5. Ghid de instalare.....	1
6. Folosește metoda.....	2
7. Note.....	3
8. Atenție și prudență.....	3
9. Întreținere.....	3
10. Depozitare.....	3

Notă: Aspectul produselor descrise în acest manual poate fi puțin diferit față de produsele finite. Acest lucru nu va afecta funcționarea produsului. Vă rog, atenție, dacă vă cauzează vreo neplăcere.

1. Introducere manuală

Acest manual face parte din articolul la care se referă. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, deoarece acestea oferă informații importante despre SIGURANȚA ÎN TIMPUL UTILIZĂRII ȘI PROCEDURILOR DE ÎNTREȚINERE. Descrierile și imaginile conținute în publicație nu sunt obligatorii; Avem dreptul de a modifica orice informație în scopuri de îmbunătățire fără nicio obligație de a actualiza acest manual. Grafica și imaginile din acest manual sunt doar exemple. Orice îmbunătățire a produselor este disponibilă.

2. Sfera aplicabilă

Este folosit pe scară largă în spitale, aziluri de bătrâni, îngrijire la domiciliu.

3. Caracteristici

1) Sistem avansat de motoare medicale (3 motoare, 1 cutie de control, 1 dispozitiv de telefon)

2) Placă rece de oțel, suprafață complet turnată 3) Decor din lemn pentru cap și picior și laterale 4) Balustrade din aliaj de aluminiu, care pot fi pliabile ușor în sus și în jos 5) 4 piese roți metalice de 5"

4. Parametri tehnici

Model nr.	JL8102
Intervalul unghiului secțiunii din spate	0°-80° (±5°)
Intervalul unghiului secțiunii piciorului	0°-40°(±5°)
Înălțime reglabilă	500-750mm
Dimensiune(L*W*H)	2120*970*500-750mm

5. Ghid de instalare

©Pentru a economisi volumul de împachetare și transportul în siguranță, patul de spital pe care l-ai primit este parțial detașat . S-ar putea să fie nevoie să montezi placa de cap și picior, roțile, balustradele.

Notă: Asigură-te că patul este instalat complet înainte de a-l folosi.

6. Metoda de utilizare

6.1 Diferite poziții pot fi ajustate cu controlorul manual (Figura 1):

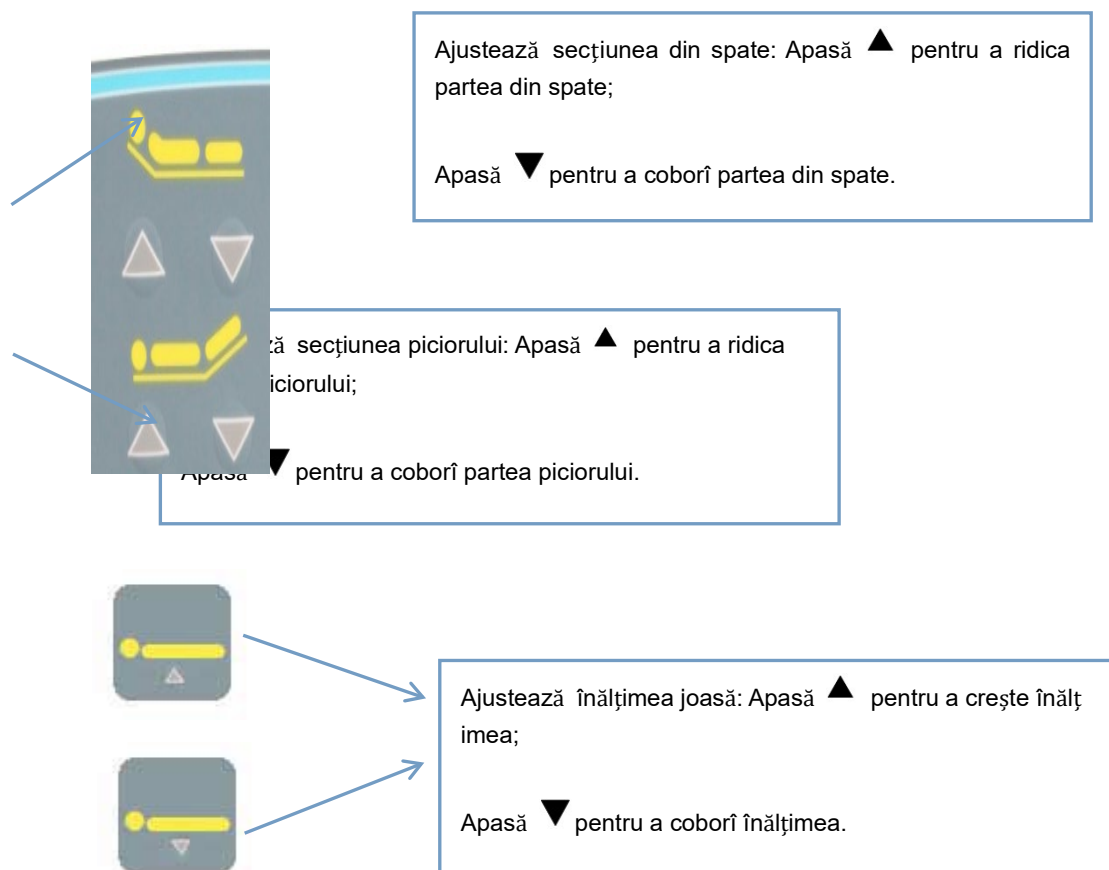


Figura 1

6.2 Sus și jos al balustrada de protecție

Scoate lacătul pentru a coborî parapetul (deblocare). (Figură 2)

Trage balustrada laterală până auzi un clic (blocare).

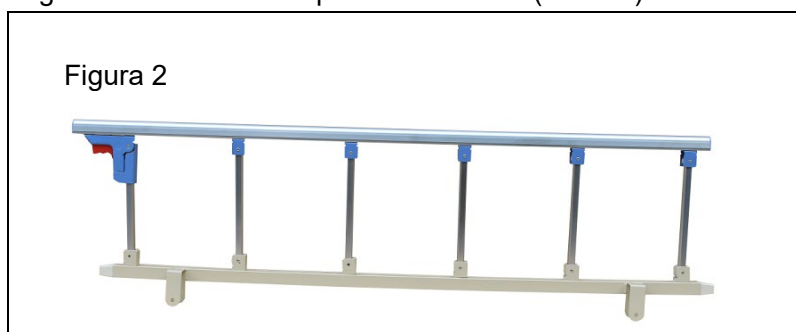



Figura 2

6.3 Folosirea metodei roților:

Dacă patul tău este echipat cu roți, poți muta paturile cu sau fără pacient pe pat.

Notă: Blochează roțile când te oprești sau localizezi patul.

Pedale de frână pe roți rotice. (Figură 3)

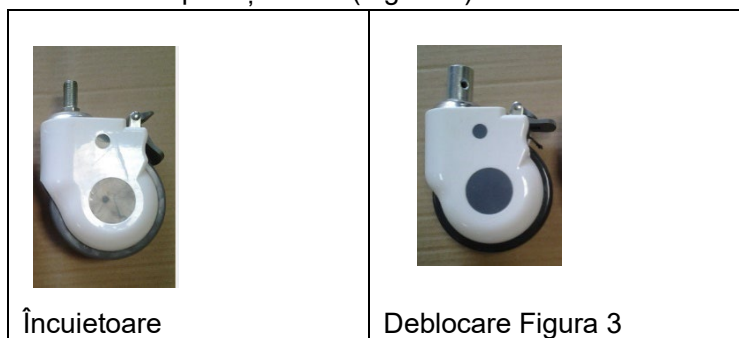

7. Note

7.1 Operatorii trebuie să citească cu atenție acest manual, să urmeze instrucțiunile și să se familiarizeze cu procedurile corecte de operare și întreținere ale patului de spital.

7.2 Când transferi pacienții, asigură-te că blochezi balustrada de protecție. Compania nu își asumă răspunderea pentru consecințele rezultate ale unei operațiuni incorecte.

7.3 Acțiunile ilegale și barbare și operarea prin suprasarcină sunt interzise, pentru a evita utilizarea necorespunzătoare care să deterioreze patul de spital.

8. Avertizare și prudență

- NU PERMITEȚI COPIILOR SĂ URCE SAU APROAPE DE PAT ÎN TIMPUL OPERĂRII.
- NU PERMITEȚI CA ACEST DISPOZITIV SĂ FIE FOLOSIT DE COPII.
- CÂND OPEREZI FUNCȚIA HI-LOW, GENUNCHI, TRENDELENBURG, TRENDELENBURG INVERSAT SAU SPATE A PATULUI, ASIGURĂ-TE ÎNTOTDEAUNA CĂ PERSOANA FIXATĂ ÎN PAT ESTE POZIȚIONATĂ CORECT ÎN INTERIORUL PATULUI. NU LĂSA NICIO EXTREMITATE SĂ IASĂ PESTE MARGINE SAU ÎNTRE BALUSTRADELE PATULUI ATUNCI CÂND ÎNDEPLINEȘTI ORICE FUNCȚIE.
- NU FOLOSIȚI ȘINE LATERALE NEAUTORIZATE.
- ETICHETELE DE AVERTIZARE APLICATE PE PAT EVIDENȚIAZĂ PERICOLELE SAU PRACTICILE NESIGURE CARE POT DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE ȘI/SAU DAUNE MATERIALE.
- ÎNAINTE DE A OPERA, ASIGURAȚI-VĂ CĂ NITURILE CADRULUI PATULUI SUNT BINE FIXATE ÎN CÂRLIGELE DE LA CAPETELE PATULUI: ALTFEL POT APĂREA LEZIUNI SAU DETERIORĂRI.
- PĂSTREAZĂ TOATE PĂRȚILE MOBILE LIBERE DE OBSTACOLE (DE EXEMPLU, PĂTURI/CEARȘAFURI, PĂTURI/PERNE DE ÎNCĂLZIRE, TUBURI, CABLAJE ȘI ALTE TIPURI DE PRODUSE)

9. Întreținere

9.1 Păstrați curățenia ca de rutină (inclusiv dezinfectare).

9.2 Verifică dacă vreo piesă este slăbită sau nu, ca de obicei.

10. Depozitare

10.1 Depozitare în locul unui mediu rezistent la umezeală și fără coroziune